

# 血流スコープ

キャピラロスコピー (Capillaroscopy)

様々な業界の  
ベストパートナー

**医療業界**  
Medical

**健康業界**  
Health

**美容業界**  
Beauty

キャピラロ



TOKU CapiQaro

研究者のニーズから生まれた  
**目的別5モード搭載で**  
**計測・ズーム対応の**  
**血流スコープ**です。



本体取り外し可能

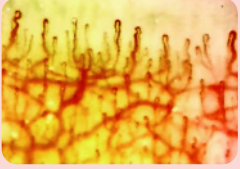
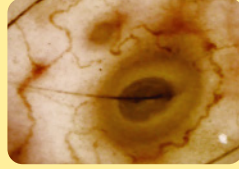

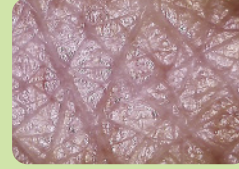
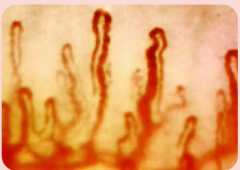
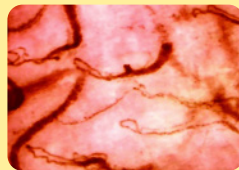
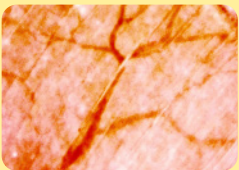
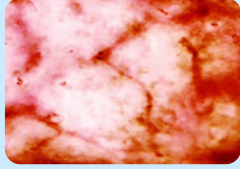
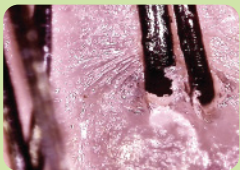


日本製

360,000円 (税別) 396,000円 (税込)

 株式会社 徳  
Toku Corporation

# 5モードで最適な観察映像

指先血流モード①&②	肌血流モード	表皮・自然色モード	頭皮血流モード
 指先血流130倍	 顔の血流460倍	 舌血流140倍	 肌スキマ460倍
 指先血流510倍	 歯肉血流460倍	 マウス血流460倍	 頭皮血流460倍
	 顔シミ460倍	 毛髪460倍	

※各観察動画サンプルにつきましては当社ホームページ <https://toku-inc.co.jp>又は、当社宛てにお問い合わせください。

## あらゆる業界・業種のさまざまなシーンで活躍する TOKU CapiQaro

医療業界	膠原病(強皮症)、糖尿、高血圧の実証機器(治験・試験用の機器)	大学・大学院・付属病院・クリニック・民間研究機関
健康業界	(手指、足指、皮下)血管・血流観察	健康食品(サプリメント・漢方)健康機器(各種医療器・水素酸素・繊維類)
美容業界	(肌・頭皮・上腕内側等の血流)美肌・毛髪頭皮観察	エステサロン、美容サロン、化粧品・育毛剤メーカー
その他	医師、薬局、保健所、動物血流試験	歯科医院、薬局、研究所、整体・接骨院、保健所、健康保険組合

### TOKU CapiQaroの特徴

#### 無採血の安心チェック

採血なし、安心して血流観察ができます。

#### 最新型の専用架台(特許出願中)

XYZ方向に位置調整が可能で、手を動かす必要がなくなり、手振れ防止機能により解析精度が高まりました。

#### 高精細・軽量・コンパクト

従来機と比べ画素数が2倍以上、最大510xズームが可能となり、解析精度が更にUPしました。本体重量はわずか110g。より細くコンパクトになり、ハンディー操作で全部位の観察に対応できます。

#### 業界初! 5モード機能搭載

- 指先血流モード1
- 指先血流モード2
- 肌血流モード
- 頭皮血流モード
- 表皮・自然色モード

#### ソフト部

#### マイクロスコープ映像撮影表示ソフト

動画・静止画の記録保存。全画面・2画面同時動画比較が可能で、Before&Afterが一目瞭然!

#### スケールバー表示・2点間の距離測定

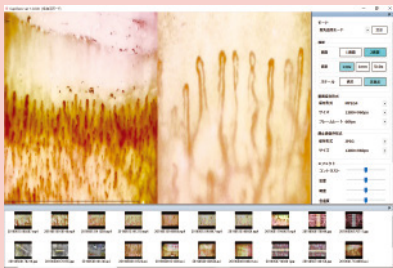
計測に便利なスケールバーを画面に表示でき、2点間の距離も計測できます。

#### Windows対応

Windowsに対応し、USB3.0接続によりPCの画面で観察可能となりました。専用モニターやAC電源は不要です。

#### 仕様

型式	卓上据置型(本体のみハンディタイプ)
映像信号	デジタル CMOSカラー方式
モード搭載	5モード(指血流①&②/肌血流/頭皮血流/表皮・自然色)
画素数	130万画素
倍率	130x~510xズーム
画面	全画面・2画面表示 同時動画比較可能
計測	寸法計測(2点間)・スケールバー表示
映像出力	USB3.0映像出力
照明方式	高輝度LEDによる直接照明
電源	USBから供給
消費電力	1.6W以下
本体サイズ	70mm(横)×120mm(縦)×65mm(高さ) XYZ方向に位置調整 手振れ防止機能付
架台サイズ	φ30(外径)×90(長さ)mm
本体重量	本体110g(総重量263g)
付属品	アタッチメントA、延長ケーブル、指先用観察オイル



#### 2画面同時動画比較可能

撮影した動画や静止画を記録保存し、全画面・左右2画面に表示することが可能です。血流動画を同時に再生できるので、Before&Afterの比較が容易にできます。動画はAVI・MPEG4、静止画はJPEG・PNG形式で保存可能です。

サプライ品 各3,300円(税込)	 指先用 5本入りセット	 肌用 4本入りセット	 頭皮用 3本入りセット	 毛細血管 観察シート 100枚入り
----------------------	--	---	--	---

※本機は医療機器ではありません。診断行為はしないでください。  
※このカタログに掲載の商品は、改良のため予告なく変更することがあります。

日本製

 株式会社 徳  
Toku Corporation

■TOKU・キャピラロ 製造販売元  
〒111-0022 東京都台東区清川1-7-6  
[TEL]03(6802)0655  
[FAX]03(6802)0545  
[E-mail]toku@toku-inc.co.jp  
[URL]https://toku-inc.co.jp

お問い合わせは

測定器の総合商社  
 株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明」をよくお読みください。